



## Navodila za domačo uporabo pralnih zaščitnih bombažnih mask:

- Maska je namenjena **večkratni uporabi**.
- **PRED NAMESTITVIJO MASKE SI UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE**
- Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega korena preko ust in pod brado, da se maska tesno prilega obrazu.
- **Maske se med uporabo ne dotikajte**, v primeru dotika **si vedno umijte ali razkužite roke!!!** (Tako preprečite prenos mikrobov).
- **Maske nikoli ne nosite pod nosom ali pod brado!!!!**
- Po 2 urah ali v primeru ovlažitve maske le to odstranite s prijemom za trakove ali elastiki, Maske se nikoli ne dotikajte spredaj.
- Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte navzdol), s tem preprečite raztros mikrobov iz površine maske po vaši obleki.
  
- **PO ODSTRANITVI SI OBVEZNO UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE!!!**

### Vzdrževanje.

Po uporabi masko odložite na določeno mesto, da ne bodo prihajale v kontakt s čistim perilom, materialom.


Maske izdelujte iz materialov (bombaž), ki omogočajo pranje v pralnem stroju na najmanj 60°C, ali 95°C. Uporabite običajne pralne praške. Suho masko prelikajte z likalnikom.

Prilagamo model za šivanje maske iz bombažnega blaga.



## NAVODILA ZA IZDELAVO ZAŠČITNE MASKE IZ BOMBAŽA

Pri izdelavi zaščitnih mask smo v šivalnici UKC LJ izhajali iz kirurške maske, izmerili smo širino in dolžino, odločili pa smo se za zavezovanje z bombažnimi trakovi – elastika namreč ni primerna za pranje na visokih temperaturah.

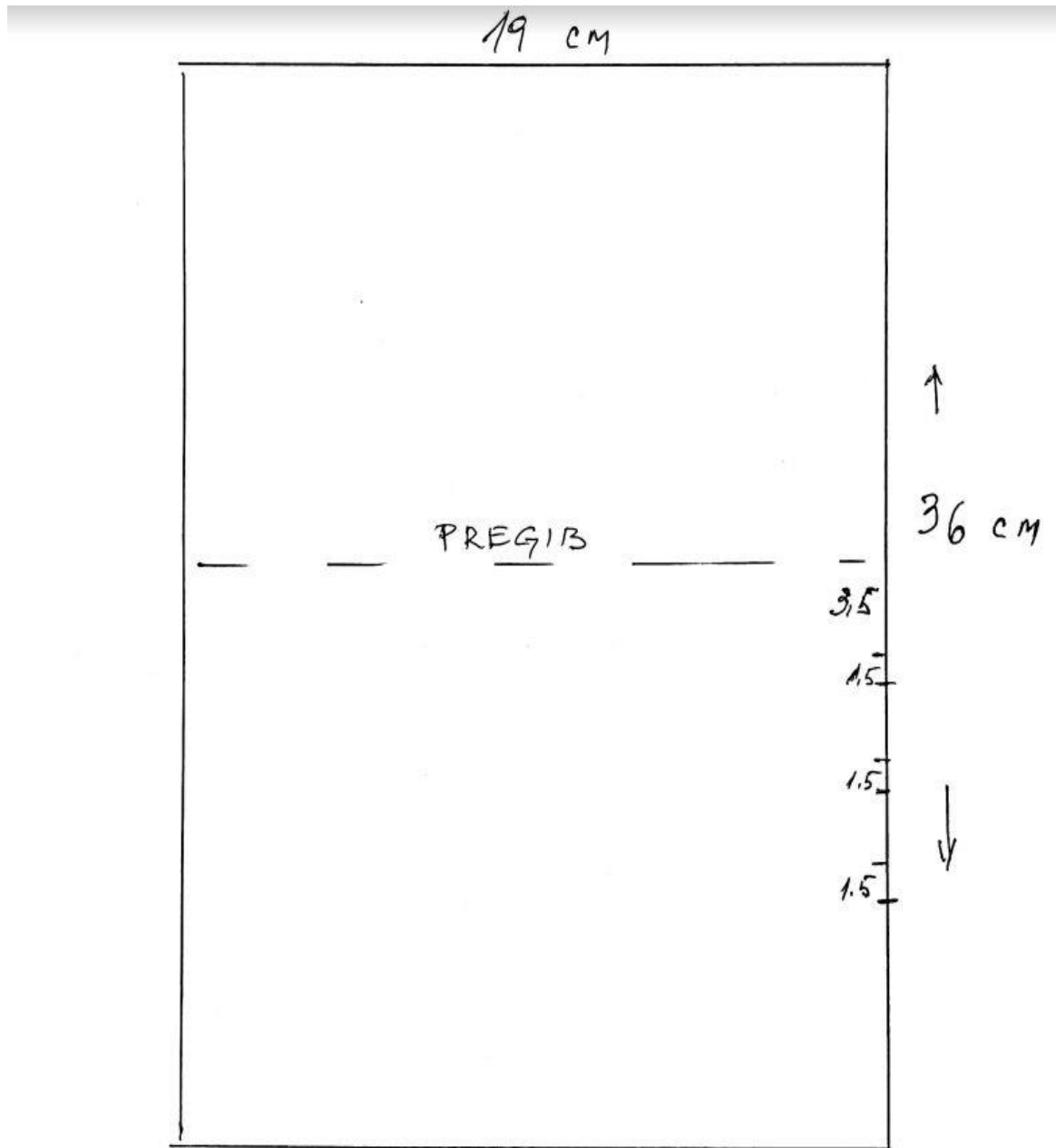


Za izdelavo ene maske potrebujemo kos bombažnega blaga dimenzij 19 krat 36 cm in dva bombažna trakova, dolga 100 cm.


Pripravimo šablono za označitev gubic, ki so namenjene temu, da je masko mogoče razširiti in prilagoditi.



Delo si lahko poenostavimo tako, da položaj gubic označimo, ko imamo blago že na stroju.

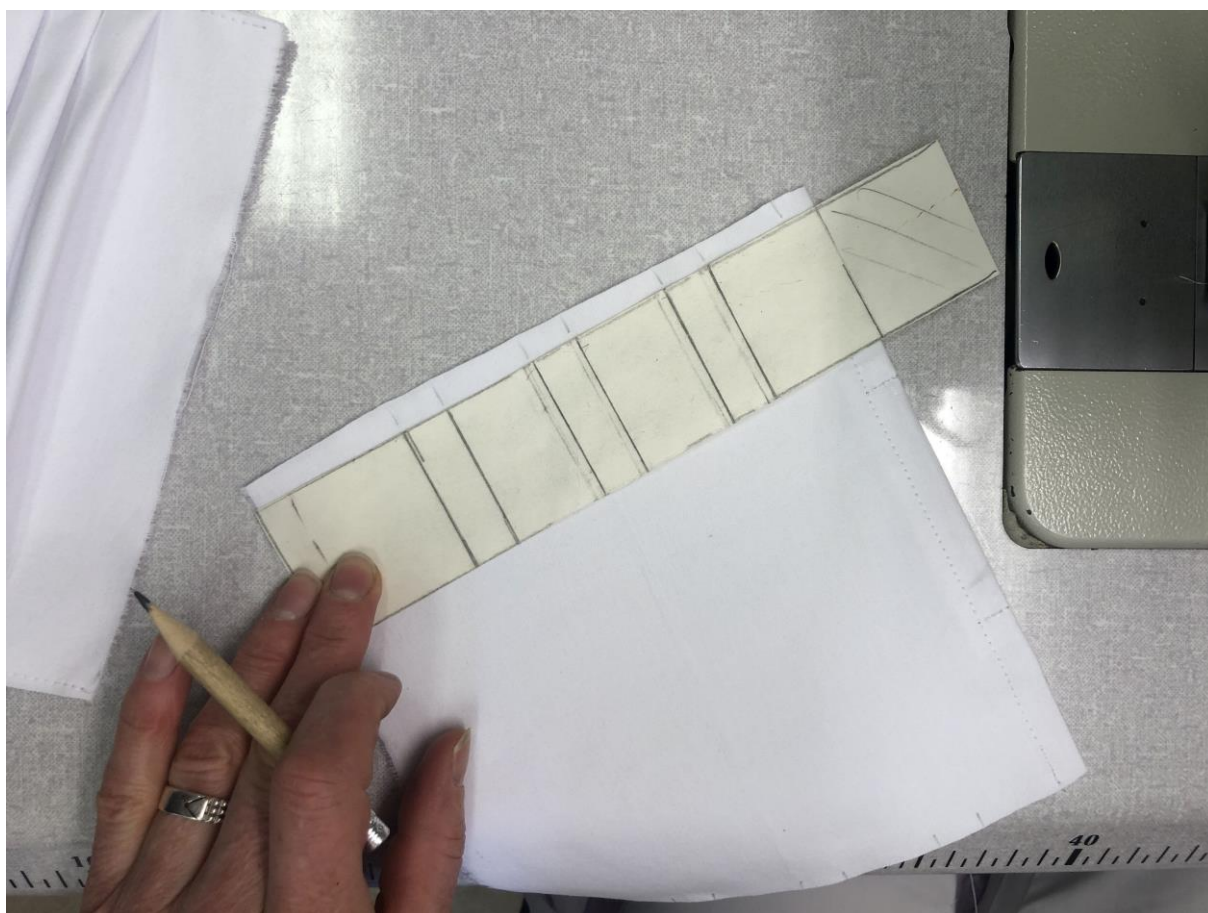

Za dobro tesnjenje maske na nosnem predelu uporabimo gospodinjsko žičnato zapiralno sponko za vrečke, ki jo dobimo v mnogih trgovinah z živili. Ker ta žička ne sme prodreti ven, jo vtaknemo v kos materiala, ga prepognemo, si označimo gubice in žičko vstavimo v nosni del, da ga kasneje lahko namestimo.

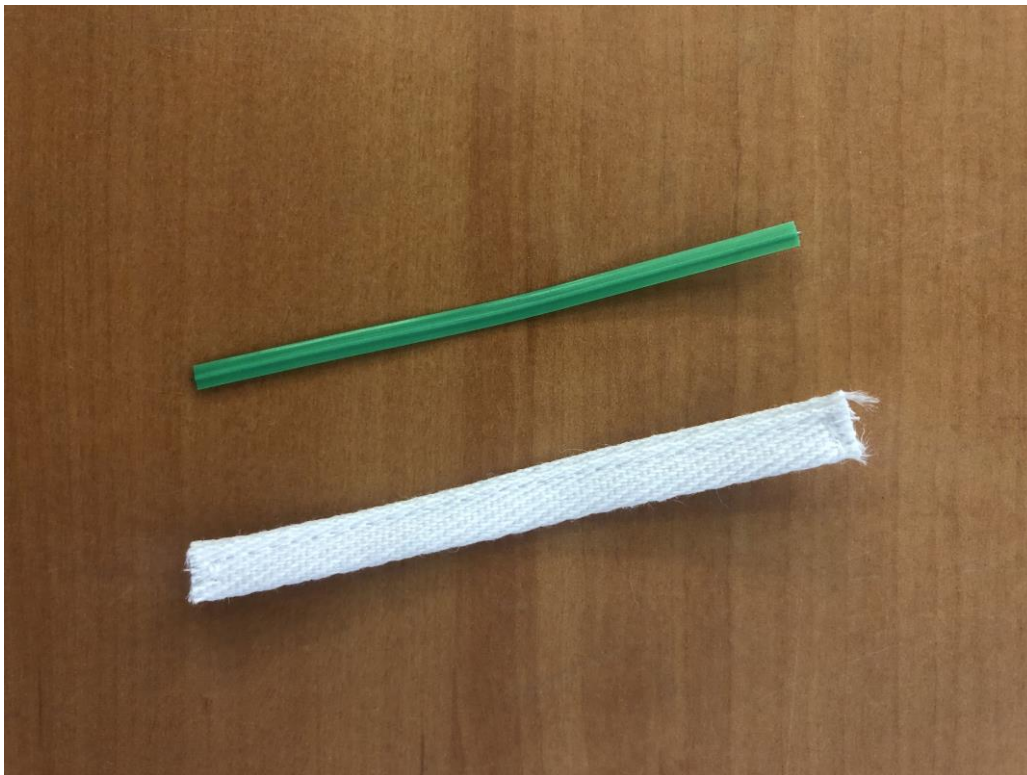

Dokončano masko si namestimo tako, da zgornji trak zavežemo za glavo, spodnjega pa za vratom.

